



SISSEL® COLD THERAPY

COMPRESSION



**KOMPRESINIO ŠALDANČIO ĮTVARO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

SISSEL® kompresinis šaldantis įtvaras yra pripučiamas šaldantis kelio / alkūnės, riešo ar kulkšnies įtvaras, pagamintas kaip sąnario tvarstis. Naudojant įtvarą, galima gydyti ūminius sužalojimus (raiščiu, sąnarių), tinimą, ūminius ar lėtinius sąnarių skausmus (pavyzdžiui, reumatinis skausmus). Įtvaras taip pat tinkamas palaikyti gydymą ir terapines programas.

Šalčio ir spaudimo derinys tvarščio pavidalu pasižymi dideliu efektyvumu. Suspaudimas palaiko ir stabilizuoja, padidindamas šalčio efektyvumą. Laisvai nuimamas vidinis šaldantis įklotas gali būti laikomas šaldytuve arba šaldiklyje.

Privalumai:

- ✓ Mažina skausmą ir uždegimą;
- ✓ Šaltis ir kompresija užtikrina visišką patinimo prevenciją;
- ✓ Papildomas sąnario stabilizavimas po sportinių traumų, patempimų ir kt.;
- ✓ Pridedama pompa slėgio reguliavimui;
- ✓ *Slow Flow* gelis užtikrina ilgalaikį temperatūros išsaugojimą;
- ✓ Patogus *velcro* užsegimas, puikiai prisitaikantis prie sąnario;
- ✓ Lengvai dezinfekuojamas;
- ✓ Esant poreikiui, gali būti dedamas ant drabužių;
- ✓ Galimi 3 įtvaro variantai: kelio / alkūnės, riešo, kulkšnies.

Indikacijos:

- Uždegimai;
- Patinimai;
- Skausmai;
- Sporto traumos;
- Reumatinės ligos.

Kontraindikacijos:

- Nenaudokite tiesiogiai ant atvirų sužalojimų ar žaizdų (pirmiausia uždenkite);
- Nenaudokite neapibrėžtiems rezultatams. Pasitarkite su gydytoju ar terapeutu.

Sudėtis:

Užvalkalo spalva:

Juoda	Mėlyna	Užpildas
100 % nailono veliūras	65 % poliesteris 35 % medvilnė	Celiuliozė Vendens distiliatas

Priežiūra. Nuvalykite drėgnu rakšluosčiu ir nusausinkite.




Dezinfekcija. Naudokite purškiamą arba užpilamą dezinfekantą. Leiskite dezinfekantui susigerti, jei reikia, nuvalykite. Naudokite tik tinkamus valiklius.

Temperatūra. Įtvarą laikykite šaldiklyje arba šaldytuve (iki -18 °C temperatūros). Kuo žemesnėje temperatūroje laikomas įtvaras, tuo ilgesnis šaldantis poveikis.

Įspėjimas. Laikomas žemoje temperatūroje įtvaras gali pakenkti Jūsų odai. Esant poreikiui, odą apsaugokite rankšluosčiu.

Įtvaro užsidėjimo / nuėmimo instrukcija.

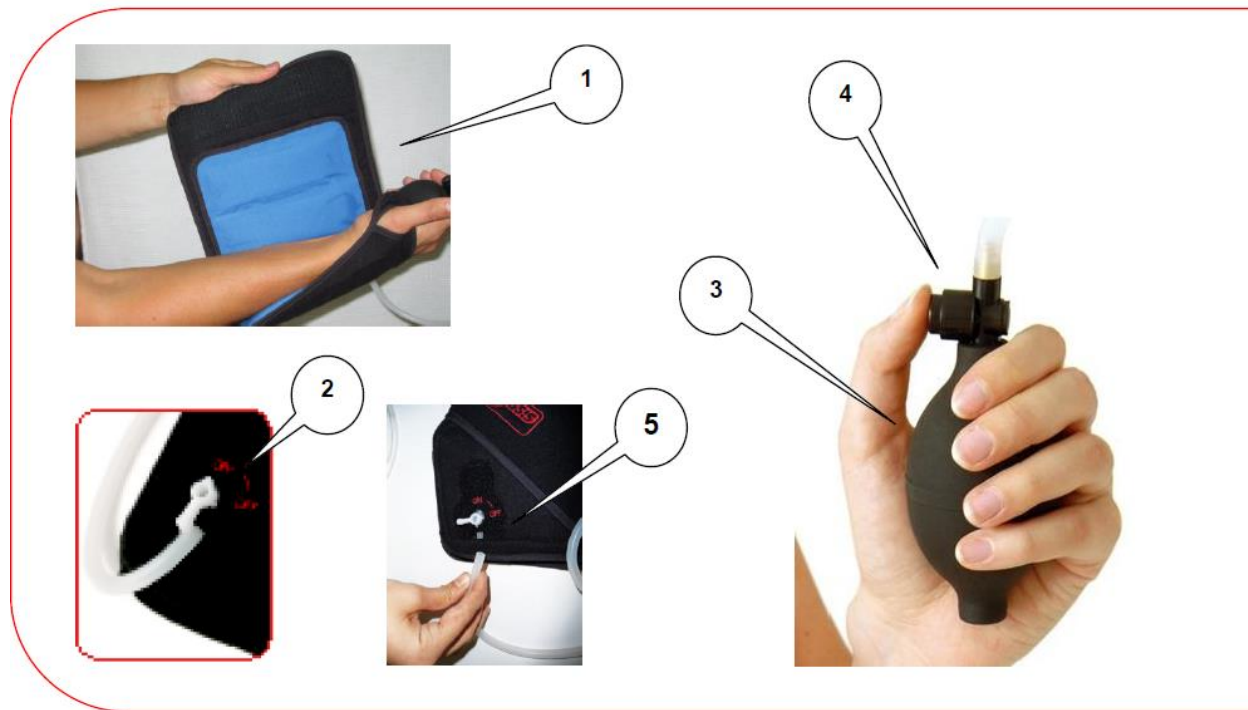

Užsidėjimas

1. Uždėkite įtvarą, užklijuokite *velcro* užsegimu (1)
2. atidarykite vožtuvą („ON“) (2)
3. pripūskite (3)
4. esant poreikiui, pareguliuokite slėgį. Slėgio išleidimo antgalis (4)
5. uždarykite antgalį („OFF“) (2)

6. Esant poreikiui, ištraukite vamzdelį.

Pastaba. Neišpūskite įtvoro per stipriai, užtikrinkite tinkamą jo padėtį. Užsidėję, nepalikite per laisvo.

Sąnarys turi būti įstatomas į atvirą įtvoro vietą (keliui ir alkūnei suspausti).



Nuėmimas

1. Atidarykite antgalį („ON“) (2)
2. Išleiskite orą:
 - paspauskite išleidimo antgalį (4) arba
 - ištraukite vamzdelį (5)
3. Atklijuokite *velcro* užsegimą, nuimkite įtvorą (1)
4. Išspauskite likusį orą

SISSEL® GmbH

Bruchstrasse 48

D-67098 Bad Dürkheim

Germany

www.sissel.com

